

**Nome Técnico:** Sistema de Fixação Ortopédicos e Dispositivos Associados

**Nome Comercial:** Família de Placas Especiais para Mini e Micro Fragmentos Traumaone

**BIOMET**  
MICROFIXATION

**Fabricado por:**

BIOMET MICROFIXATION, INC  
1520 Tradeport Drive  
Jacksonville, Florida, 32218  
Estados Unidos da América  
Tel: 904.741.4400  
Fax: 904.741.4500  
Site: [www.zimmerbiomet.com](http://www.zimmerbiomet.com)



**Intermedic**  
Technology

**Importado e Distribuído por:**

INTERMEDIC TECHNOLOGY IMP. E EXP. LTDA  
Rua Enxovia nº 472, Sala 1605 a 1608, 1707 a 1709  
Vila São Francisco (Zona Sul)  
CEP: 04.711-030, São Paulo, SP, Brasil  
CNPJ: 01.390.500/0001-40  
Fone: +55 (11) 3503-2000/3503-2030  
Site: [www.intermedic.com.br](http://www.intermedic.com.br)

**Responsável Técnica:** Alina Ávila Soares de Oliveira – CRFSP – 62.351

**ATENÇÃO:** Ler atentamente todas as instruções antes da utilização. Cumprir todas as advertências e precauções mencionadas nestas instruções. A não observação destes pontos poderá levar à ocorrência de complicações.

**PRODUTO DE USO ÚNICO**  
**PRODUTO DE USO MÉDICO**  
**PRODUTO NÃO ESTÉRIL**  
**ESTERILIZAR ANTES DO USO**  
**PROIBIDO REPROCESSAR**

**REGISTRO ANVISA Nº.:** 80094170069

**Nº. de Lote, Data de Fabricação e Prazo de Validade:** Veja na rotulagem do produto.

**ATENÇÃO:** Para obter essa Instrução de Uso em formato impresso, solicite através do e-mail [regulatório@intermedic.com.br](mailto:regulatório@intermedic.com.br)

### INTRODUÇÃO









As Placas Especiais para Mini e Micro Fragmentos TraumaOne® são utilizadas para fixação e imobilização durante procedimentos, como por exemplo, fraturas, osteotomias, procedimentos reconstrutivos ou procedimentos de revisão para casos em que outros tratamentos ou dispositivos não tenham sido eficientes.











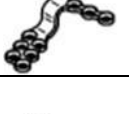

As Placas são destinadas à fixação de mini e micro fragmentos, pois possuem diâmetros menores ou iguais a 2,7mm. As placas são normalmente aplicadas em conjunto com os Parafusos para Mini e Micro Fragmentos TraumaOne® de ossos craniomaxilofaciais, orais, ossos da mão, do pé e osso esterno que serão registradas à parte.

As Placas Especiais para Mini e Micro Fragmentos TraumaOne® diferenciam-se principalmente quanto às suas dimensões e formato. Todas as placas integrantes desta família são destinadas à fixação não-rígida, pois não possuem dispositivo específico de travamento em seus furos.









### DESCRIÇÃO

Abaixo segue a descrição dos componentes da Família de Placas Especiais para Mini e Micro Fragmentos TraumaOne®:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IMAGEM
01-7038	Placa L Esquerda 4x6, Longa	
01-7039	Placa L Direita 4x6, Longa	
01-7123	Placa Orbital 4 Furos, HX	
01-7121	Placa Orbital 6 Furos, Curvada HX	
01-7122	Placa Orbital 18 Furos, HX	
01-8689	Placa Orbital 4 Furos, Curvada	
01-8678	Placa L Esquerda 2x2, Longa	
01-8679	Placa L Direita 2x2, Longa	
SP-2575	Placa L Esquerda 3x3, Média	
SP-2576	Placa L Direita 3x3, Média	
01-8636	Placa L Esquerda 3x3, Longa	
01-8637	Placa L Direita 3x3, Longa	
01-8680	Placa L Esquerda 4x6, Longa	

01-8681	Placa L Direita 4x6, Longa	
01-8604	Placa Y 5 Furos, X-longa	
SP-2618	Placa Duplo Y 6 Furos, Regular	
SP-2619	Placa Duplo Y 6 Furos, X-Longa	
SP-1865	Placa Orbital 0.2mm	
SP-1395	Placa L Soares 1.5, Esquerda	
SP-1396	Placa L Soares 1.5, Direita	
SP-1397	Placa Soares Lefort, 2mm, Esquerda	
SP-1398	Placa Soares Lefort, 2mm, Direita	
SP-1481	Placa Lefort 5mm Angulada, Esquerda	
SP-1482	Placa Lefort 5mm Angulada, Direita	
SP-1483	Placa Lefort 6mm Angulada, Esquerda	
SP-1484	Placa Lefort 6mm Angulada, Direita	

		
SP-1485	Placa Lefort 7mm Angulada, Esquerda	
SP-1486	Placa Lefort 7mm Angulada, Direita	
SP-1487	Placa Lefort 8mm Angulada, Esquerda	
SP-1488	Placa Lefort 8mm Angulada, Direita	
SP-1489	Placa Lefort 9mm Angulada, Esquerda	
SP-1490	Placa Lefort 9mm Angulada, Direita	
SP-1491	Placa Lefort 10mm Angulada, Esquerda	
SP-1492	Placa Lefort 10mm Angulada, Direita	
SP-1523	Placa Lefort Flat Angulada, Esquerda	
SP-1524	Placa Lefort 2mm Angulada, Esquerda	
SP-1525	Placa Lefort 3mm Angulada, Esquerda	
SP-1526	Placa Lefort 4mm Angulada, Esquerda	

SP-1545	Placa Lefort Flat Angulada, Direita	
SP-1546	Placa Lefort 2mm Angulada, Direita	
SP-1547	Placa Lefort 3mm Angulada, Direita	
SP-1548	Placa Lefort 4mm Angulada, Direita	
SP-1772	Placa L 2.0mm 3X3, 100° Direita	
SP-1773	Placa L 2.0mm 3X3, 100° Esquerda	
SP-1774	Placa L 2.0mm 2X2, 100° Direita	
SP-1775	Placa L 2.0mm 2X2, 100° Esquerda	

**COMPONENTES ANCILARES**

Segue abaixo a descrição dos componentes ancilares destinados a serem utilizados com a Família de Placas Especiais para Mini e Micro Fragmentos TraumaOne®, registrados à parte no Registro ANVISA n.º 80094170071.

**Observação:** Os componentes ancilares não fazem parte deste registro, portanto, são registrados e comercializados à parte.

Código	Descrição
41-2205	Parafuso não-bloqueado Drill Free 2.0x5mm
41-2207	Parafuso não-bloqueado Drill Free 2.0x7mm
41-2005	Parafuso não-bloqueado 2.0x5mm
41-2006	Parafuso não-bloqueado 2.0x6mm
41-2008	Parafuso não-bloqueado 2.0x8mm
41-2010	Parafuso não-bloqueado 2.0x10mm
41-2012	Parafuso não-bloqueado 2.0x12mm
41-2014	Parafuso não-bloqueado 2.0x14mm

41-2016	Parafuso não-bloqueado 2.0x16mm
41-2018	Parafuso não-bloqueado 2.0x18mm
41-2305	Parafuso não-bloqueado 2.3x5mm
41-2306	Parafuso não-bloqueado 2.3x6mm
41-2308	Parafuso não-bloqueado 2.3x8mm
41-2310	Parafuso não-bloqueado 2.3x10mm
41-2312	Parafuso não-bloqueado 2.3x12mm
41-2314	Parafuso não-bloqueado 2.3x14mm
41-2316	Parafuso não-bloqueado 2.3x16mm
41-2318	Parafuso não-bloqueado 2.3x18mm
41-2708	Parafuso não-bloqueado Emergência 2.7x8mm
41-2710	Parafuso não-bloqueado Emergência 2.7x10mm
41-2712	Parafuso não-bloqueado Emergência 2.7x12mm
41-2714	Parafuso não-bloqueado Emergência 2.7x14mm
41-2716	Parafuso não-bloqueado Emergência 2.7x16mm
41-2718	Parafuso não-bloqueado Emergência 2.7x18mm
91-5607	Parafuso em Cruz IMF 2.0x7mm
91-5609	Parafuso em Cruz IMF 2.0x9mm
91-5611	Parafuso em Cruz IMF 2.0x11mm
91-6105X	Parafuso em Cruz Drill Free 1.65x5MM
91-6106X	Parafuso em Cruz Drill Free 1.65x6MM

### TABELA DE CORRELAÇÃO

A seguir segue tabela de comparação entre as placas que fazem parte deste registro e os parafusos anclares relacionados acima.

	41-22XX	41-20XX	41-23XX	41-27XX	91-56XX	91-61XXX
<b>01-7038</b>	X	X	X	X	X	X
<b>01-7039</b>	X	X	X	X	X	X
<b>01-7123</b>	X	X	X	X	X	X
<b>01-7121</b>	X	X	X	X	X	X
<b>01-7122</b>	X	X	X	X	X	X
<b>01-8689</b>	X	X	X	X	X	X
<b>01-8678</b>	X	X	X	X	X	X
<b>01-8679</b>	X	X	X	X	X	X
<b>SP-2575</b>	X	X	X	X	X	X
<b>SP-2576</b>	X	X	X	X	X	X
<b>01-8636</b>	X	X	X	X	X	X
<b>01-8637</b>	X	X	X	X	X	X
<b>01-8680</b>	X	X	X	X	X	X
<b>01-8681</b>	X	X	X	X	X	X
<b>01-8604</b>	X	X	X	X	X	X

INTERMEDIC TECHNOLOGY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rua Enxovia, nº 472, Sala 1605 a 1608, 1707 a 1709, Vila São Francisco (Zona Sul), CEP: 04.711-030, São Paulo, SP, Brasil  
 CNPJ: 01.390.500/0001-40 | Fone: +55 (11) 3503-2000/3503-2030 | Site: [www.intermedic.com.br](http://www.intermedic.com.br)

SP-2618	X	X	X	X	X	X
SP-2619	X	X	X	X	X	X
SP-1865	X	X	X	X	X	X
SP-1395	X	X	X	X	X	X
SP-1396	X	X	X	X	X	X
SP-1397	X	X	X	X	X	X
SP-1398	X	X	X	X	X	X
SP-1481	X	X	X	X	X	X
SP-1482	X	X	X	X	X	X
SP-1483	X	X	X	X	X	X
SP-1484	X	X	X	X	X	X
SP-1485	X	X	X	X	X	X
SP-1486	X	X	X	X	X	X
SP-1487	X	X	X	X	X	X
SP-1488	X	X	X	X	X	X
SP-1489	X	X	X	X	X	X
SP-1490	X	X	X	X	X	X
SP-1491	X	X	X	X	X	X
SP-1492	X	X	X	X	X	X
SP-1523	X	X	X	X	X	X
SP-1524	X	X	X	X	X	X
SP-1525	X	X	X	X	X	X
SP-1526	X	X	X	X	X	X
SP-1545	X	X	X	X	X	X
SP-1546	X	X	X	X	X	X
SP-1547	X	X	X	X	X	X
SP-1548	X	X	X	X	X	X
SP-1772	X	X	X	X	X	X
SP-1773	X	X	X	X	X	X
SP-1774	X	X	X	X	X	X
SP-1775	X	X	X	X	X	X

### MATERIAL DE COMPOSIÇÃO

As placas são fabricadas em Titânio Grau I, II e IV de acordo com a norma ASTM F-67. Segue abaixo tabela com o grau de titânio usado para cada modelo.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATERIAL DE COMPOSIÇÃO
01-7038	Placa L Esquerda 4x6, Longa	Grau II
01-7039	Placa L Direita 4x6, Longa	Grau II
01-7123	Placa Orbital 4 Furos, HX	Grau IV
01-7121	Placa Orbital 6 Furos, Curvada HX	Grau IV
01-7122	Placa Orbital 18 Furos, HX	Grau IV

01-8689	Placa Orbital 4 Furos, Curvada	Grau IV
01-8678	Placa L Esquerda 2x2, Longa	Grau IV
01-8679	Placa L Direita 2x2, Longa	Grau IV
SP-2575	Placa L Esquerda 3x3, Média	Grau IV
SP-2576	Placa L Direita 3x3, Média	Grau IV
01-8636	Placa L Esquerda 3x3, Longa	Grau IV
01-8637	Placa L Direita 3x3, Longa	Grau IV
01-8680	Placa L Esquerda 4x6, Longa	Grau IV
01-8681	Placa L Direita 4x6, Longa	Grau IV
01-8604	Placa Y 5 Furos, X-longa	Grau IV
SP-2618	Placa Duplo Y 6 Furos, Regular	Grau IV
SP-2619	Placa Duplo Y 6 Furos, X-Longa	Grau IV
SP-1865	Placa Orbital 0.2mm	Grau I
SP-1395	Placa L Soares 1.5, Esquerda	Grau II
SP-1396	Placa L Soares 1.5, Direita	Grau II
SP-1397	Placa Soares Lefort, 2mm, Esquerda	Grau II
SP-1398	Placa Soares Lefort, 2mm, Direita	Grau II
SP-1481	Placa Lefort 5mm Angulada, Esquerda	Grau II
SP-1482	Placa Lefort 5mm Angulada, Direita	Grau II
SP-1483	Placa Lefort 6mm Angulada, Esquerda	Grau II
SP-1484	Placa Lefort 6mm Angulada, Direita	Grau II
SP-1485	Placa Lefort 7mm Angulada, Esquerda	Grau II
SP-1486	Placa Lefort 7mm Angulada, Direita	Grade II
SP-1487	Placa Lefort 8mm Angulada, Esquerda	Grau II
SP-1488	Placa Lefort 8mm Angulada, Direita	Grau II
SP-1489	Placa Lefort 9mm Angulada, Esquerda	Grau II
SP-1490	Placa Lefort 9mm Angulada, Direita	Grau II
SP-1491	Placa Lefort 10mm Angulada, Esquerda	Grau II
SP-1492	Placa Lefort 10mm Angulada, Direita	Grau II
SP-1523	Placa Lefort Flat Angulada, Esquerda	Grau II
SP-1524	Placa Lefort 2mm Angulada, Esquerda	Grau II
SP-1525	Placa Lefort 3mm Angulada, Esquerda	Grau II
SP-1526	Placa Lefort 4mm Angulada, Esquerda	Grau II
SP-1545	Placa Lefort Flat Angulada, Direita	Grau II
SP-1546	Placa Lefort 2mm Angulada, Direita	Grau II
SP-1547	Placa Lefort 3mm Angulada, Direita	Grau II
SP-1548	Placa Lefort 4mm Angulada, Direita	Grau II
SP-1772	Placa L 2.0mm 3X3, 100o Direita	Grau II
SP-1773	Placa L 2.0mm 3X3, 100o Esquerda	Grau II
SP-1774	Placa L 2.0mm 2X2, 100o Direita	Grau II
SP-1775	Placa L 2.0mm 2X2, 100o Esquerda	Grau II



**INSTRUMENTAIS**

As Família de Placas Especiais para Mini e Micro Fragmentos TraumaOne® devem ser implantadas exclusivamente com auxílio dos instrumentais fornecidos pelo fabricante Biomet Microfixation, Inc. Os instrumentais destinados a serem utilizados com estas placas fazem parte do Kit Instrumental para Mini e Micro Fragmentos Biomet/W.Lorenz (Registro ANVISA n.º 80094170022).

Segue abaixo a lista dos instrumentais que fazem parte do Kit Instrumental para Mini e Micro Fragmento Biomet/W.Lorenz.

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
01-0280	Retrator Orbital Adulto – esquerdo
01-0281	Retrator Orbital Adulto – direito
01-0282	Retrator Orbital Pediátrico - esquerdo
01-0283	Retrator Orbital Pediátrico - direito
15-0280	Retrator Orbital Pequeno
15-0281	Retrator Orbital Médio
01-2556	Afastador Transbucal
24-2556	Retrator Transbucal Snap - on
01-2526	Broca Twist 1.8 x 16mm
01-2541	Broca Twist 1.8 x 8mm
01-6950	Broca Twist 1.1 X 8mm
01-6951	Broca Twist 1.1 X 16mm
01-7178	Haste Center Drive 1.5mm
01-7154	Haste X-Drive Padrão 1.5mm
71-1194	Haste Sternalock Pequena 2.4mm
71-1196	Haste Sternalock Padrão 2.4mm
01-7162	Haste X-Drive 1.5mm
01-7168	Haste X-Drive Pequena 1.5mm
01-7171	Haste Center Drive Pequena 1.5mm
01-7176	Haste Center Drive Padrão 1.5mm
01-7693	Haste X-Lock 2.0mm
01-7694	Haste X-Lock Pequena 2.0mm
01-7696	Haste X-Lock Padrão 2.0mm
01-9047	Haste Center Drive 2.0mm
01-9049	Haste Center Drive 2.0mm
24-1394	Haste HT X-Lock Pequena 2.4mm
24-1396	Haste HT X-Lock Padrão 2.4mm
01-3557	Haste Hex pequena
01-3558	Haste Hex larga
01-9180	Broca Twist 1.5 x 7mm
01-9181	Broca Twist 1.5 x 15mm

01-9182	Broca Twist 1.5 x 18mm
01-9721	Broca Twist 2.2 x 20mm Stop
01-9720	Broca Twist com fenda 2.0 x 105mm
01-9722	Broca Twist 2.2 x 70mm
01-9723	Broca Twist 2.2 115mm
01-9697	Broca Twist com fenda 2.0 x 70mm
64-1010	Broca Twist 1.0 x 89mm
64-1014	Broca Twist 1.4 x 97mm
64-1019	Broca Twist 1.9 x 103mm
64-1022	Broca Twist 2.2 x 70mm
64-1023	Broca Twist 2.2 x 105mm
64-1025	Broca Twist 2.5 x 76mm
64-1026	Broca Twist 2.5 x 105mm
64-2010	Broca Twist 1.0 x 72mm
64-2014	Broca Twist 1.4 x 80mm
64-2019	Broca Twist 1.9 x 86mm
64-2025	Broca Twist 2.5 x 86mm
24-1193	Haste X-Drive 2.4mm
24-1393	Haste X-Lock 2.4mm
01-2544	Broca Lag com fenda-J 2.4 x 115mm
01-9174	Broca Lag com fenda-J 2.0 x 105mm
01-2545	Broca Step com fenda-J 2.4/1.8 – 10 x 115mm
01-9175	Broca Step com fenda-J 2.0/1.5 – 10 x 115mm
64-1110	Broca Step 1.0 / 1.4 x 89mm
64-1114	Broca Step 1.4 / 1.9 x 97mm
64-1119	Broca Step 1.9 / 2.5 x 103mm
64-2110	Broca Step 1.0 / 1.4 x 72mm
64-2114	Broca Step 1.4 / 1.9 x 80mm
64-2119	Broca Step 1.9 / 2.5 x 86mm
01-2546	Broca Blunt Nose com fenda-J 2.4/1.8mm – 115mm
01-9176	Broca Blunt Nose com fenda-J 2.0/1.5mm – 115mm
01-2562	Escareador 2.4mm
01-9172	Escareador 2.0mm
64-1517	Escareador 1.2 / 1.7
64-1523	Escareador 2.3
64-2517	Escareador 1.2 / 1.7
64-2523	Escareador 2.3
01-7139	Broca Twist Midas Rex 1.1 x 5mm Stop
01-7143	Broca Twist Midas Rex 1.0 x 3mm Stop
01-7145	Broca Twist Midas Rex 1.0 x 5mm Stop
15-1713	Broca Twist Midas Rex G3 1.1 x 3.5mm Stop
15-1715	Broca Twist Midas Rex G3 1.1 x 5mm Stop

INTERMEDIC TECHNOLOGY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rua Enxovia, nº 472, Sala 1605 a 1608, 1707 a 1709, Vila São Francisco (Zona Sul), CEP: 04.711-030, São Paulo, SP, Brasil  
 CNPJ: 01.390.500/0001-40 | Fone: +55 (11) 3503-2000/3503-2030 | Site: [www.intermedic.com.br](http://www.intermedic.com.br)

01-9185	Broca Twist Midas Rex 1.5 x 5mm Stop
01-7140	Broca Twist 1.1 X 50mm No Stop
01-7141	Broca Twist 1.1 X 50mm Stop 3.5mm
01-7142	Broca Twist 1.1 X 50mm Stop 5mm
01-7144	Broca Twist 1.1 X 50mm Stop 7mm
01-7146	Broca Twist 1.1 X 50mm Stop 9mm
01-7148	Broca Twist 1.1 X 50mm Stop 15mm
01-7149	Broca Twist 1.1 X 105mm Stop 15mm
01-7392	Broca Twist Black Max 1.1 x 3.5mm Stop
01-7393	Broca Twist Hall 1.1 x 3.5mm Stop
01-7394	Broca Twist Black Max 1.1 x 5mm Stop
01-7395	Broca Twist 1.1 x 5mm Stop
01-7397	Broca Twist Hall 1.1 x 7mm Stop
01-7423	Broca Twist 0.7 x 50mm Stop 3mm
01-7425	Broca Twist 0.7 x 50mm Stop 5mm
01-7426	Broca Twist 0.8 x 50mm Stop 5mm
01-7427	Broca Twist 0.7 x 50mm Stop 7mm
01-7428	Broca Twist 0.8 x 50mm Stop 7mm
01-9192	Broca Twist 1.5 x 50mm Stop 5.0mm
01-9193	Broca Twist 1.5 x 50mm Stop 7mm
01-9195	Broca Twist 1.5 x 50mm Stop 10mm
01-9196	Broca Twist 1.5 x 50mm No Stop
01-9197	Broca Twist 1.5 x 70mm No Stop
01-9198	Broca Twist 1.5 x 105mm No Stop
01-9199	Broca Twist 1.5 x 105mm Stop 5mm
01-9200	Broca Twist 1.5 x 105mm Stop 7mm
01-9202	Broca Twist 1.5 x 105mm Stop 11mm
01-9203	Broca Twist 1.5 x 115mm Stop 37mm
15-1723	Broca Twist Lg. Hex 1.1 x 3.5mm Stop
15-1725	Broca Twist Lg. Hex 1.1 x 5mm Stop
01-2563	Broca Twist com fenda-J 1.8 x 80mm
01-2549	Broca Twist com fenda-J 1.8 x 115mm
24-2050	Broca 1.8 x 50mm com fenda-J
24-2115	Broca 1.8 x 115mm com fenda-J
01-9901	Haste Substituta X-Drive 2.7mm
01-9607	Haste Substituta Center-Drive 2.7mm
24-1196	Haste X-Lock 2.4mm
01-7446	Haste X-Drive 1.0mm
15-1193	Haste HT X-Lock 1.5mm
15-1194	Haste HT X-Lock Pequena 1.5mm
15-1196	Haste HT X-Lock Padrão 1.5mm
20-1194	Haste HT X-Lock Pequena 2.0mm

20-1196	Haste HT X-Lock Padrão 2.0mm
20-1199	Haste com Capa IMF
64-0712	Haste para Chave de fenda X Drive 1.2
64-2717	Haste para Chave de fenda X-Drive 1.7/2.3
01-3132	Distrator Meia-face 20mm
01-3133	Distrator Meia-face 30mm
01-3131	Distrator Meia-face Conexão Flex 20mm
01-3134	Distrator Meia-face Conexão Flex 30mm
01-3221	Haste de flexão 1"
01-3222	Haste de flexão 2"
01-3223	Haste de flexão 3"
01-3216	Haste sólida 1"
01-3218	Haste sólida 2"
01-3215	Conector universal articulado
01-3234	Chave de distração Meia-face
01-3232	Removerdor de distração Meia-face
01-2788	Escareador de Placas
64-2800	Escareador 1.2/1.7/2.3
01-9048	Haste Tap 2.0mm
01-9631	Haste Tap 2.7mm
01-7164	Cabo Padrão 1.5/2.0
01-7390	Cabo Buld 1.5/2.0
01-7453	Cabo para chave de fenda 1.0
01-7600	Cabo para chave de fenda 2.0/2.4
01-7595	Cabo para chave de fenda Ratcheting 2.0/2.4
01-9905	Cabo para chave de fenda Ratcheting 2.4
24-9905	Cabo-T de chave Ratcheting
24-9905-01	Barra-T
64-6412	Cabo de chave de fenda 1.2
01-7451	Cabo de chave de fenda 2.0
64-6417	Cabo de chave de fenda 1.7/2.3
01-2775	Chave de fenda de Inserção Bloqueada Recon Completa 2.4mm
01-2774	Haste de Inserção
01-2770	Cabo
01-2777	Haste de Emergência
01-2773	Chave de fenda de Remoção Bloqueada Recon Completa 2.4mm
01-2771	Haste de Inserção
01-2772	Cabeça de remoção de Haste externa
01-2776	Cabo Non-Bloqueado
24-1196	Haste X-Lock 2.4mm
01-9900	Cabo
01-9603	Chave-de-fenda Center Drive Padrão

01-9606	Chave de fenda Center-Drive com Haste removível 2.7
01-9902	Chave de fenda X-Drive com Haste removível 2.7
01-9903	Chave-de-fenda X-Drive Padrão
01-3556	Chave de Avanço
01-3205	Chave de distração com Click pequena
01-3209	Chave de distração universal articulada com click
01-3257	Chave Quadrada
01-3251	Chave Allen
01-3252	Chave T de Ativação
24-1142	Cânula 2.4
24-1122	Cânula 2.0
24-1126	Guia de Broca 2.0 de Inserção em Cânula 2.0
24-1146	Guia de Broca Sem-Compressão 2.4
24-1148	Guia de Broca Compressão 2.4
24-1150	Guia de Broca 2.0 de Cânula 2.4
01-3253	Extrator de Fio Enroscado
20-1140	Cabo de Trocar com Cânula 2.0mm
24-1141	Cabo de Trocar 2.0/2.4
24-1140	Cabo de Trocar 2.4mm
24-1130	Guia de Broca Enroscada 2.0
24-1131	Guia de Broca Enroscada 2.4
24-1135	Guia de broca 2.4
24-1226	Guia de Broca Pequeno 2.0
24-1136	Guia de broca 2.0/2.4
01-2553	Guia de Broca Padrão 2.0
01-2559	Guia de Broca Lag
01-2794	Guia de Broca Recon 2.7
01-2795	Guia de Broca Enroscada Longa 2.7
24-1132	Guia de Broca Dupla 2.0mm
24-1134	Guia de Broca Dupla 2.4mm
24-1138	Guia de Broca Dupla 2.0/2.4
64-5512	Guia de Broca Cêntrica 1.2
64-5517	Guia de Broca Cêntrica 1.7
64-5523	Guia de Broca Cêntrica 2.3mm
64-5617	Guia de Broca Excêntrica 1.7mm
64-5623	Guia de Broca Excêntrica 2.3mm
64-5823	Guia de Broca Excêntrica 1.25mm
24-1160	Guia de Broca Lag 2.4
24-1164	Guia de Broca Lag B 1.8ID
24-1162	Guia de Broca Lag B 1.5ID
01-9615	Guia de Broca com Cabo
01-9624	Guia de Broca com Cabo Longo

01-9622	Guia de Broca com Cabo Pequeno
64-5001	Cabo para Guia de Broca
01-3255	Guia de Broca paralelo
01-9123	Medidor de profundidade 1.5/2.0
01-9125	Medidor de Profundidade 2.0/2.4 45mm
64-6110	Medidor de Profundidade 1.2 – 12cm
64-6130	Medidor de profundidade 1.7/2.3 – 13.5cm
24-1168	Guia de Profundidade Lag
24-1124	Trocar 2.0mm
24-1224	Trocar Pediátrico 2.0mm
24-1144	Trocar 2.4
01-9635	Trocar Set. 2.7
01-7167	Dobrador de Placas 3-dentes 1.5mm
01-9070	Dobrador de placas 3-dentes 2.0mm
24-2550	Dobrador 2.0/2.4mm
64-6230	Alicate Dobrador de Placa 1.2/1.7 -13cm
64-6250	Alicate Dobrador de Placa 2.3 – 13cm
01-9610	Alicate Dobrador de Placas 2.7
01-9726	Alicate Dobrador de Placa
01-7465	Alicate Dobrador de Placa
01-9728	Dobrador de Placa 2.0mm
01-7172	Cortador de Placas e Fios
01-9960	Alicate Cortador de placas 2.0mm, TC
64-6330	Cortador de placas 1.2/1.7/2.3 - 15cm
01-7186	Manipulador de Placas 1.5mm
01-9086	Manipulador de Placas 2.0mm
24-1186	Manipulador de Placa Wand 2.4mm
01-7187	Manipulador de Placas Neuro Wand
64-0062	Pinça Angulada de Placa / Parafuso 15cm
01-9095	Pinça de Manipulação de Placa
64-6010	Dispositivo de Manipulação de Parafuso 1.2
64-6030	Dispositivo de Manipulação de Parafuso 2.3
24-1198	Dispositivo de Manipulação de Parafuso 2.4
24-1128	Dispositivo de Manipulação de Placa On-Canula 2.0mm
24-1129	Dispositivo de Manipulação de Placa On-Canula 2.0mm
24-1154	Dispositivo de Manipulação de Placa On-Canula 2.4mm
24-1110	Fórceps Segurador de Placa
24-1112	Fórceps de Redução do Osso
01-3254	Fórceps de Manipulação
24-2555	Dobrador TMS
01-9613	Dobrador de Placa 2.7
01-9633	Fórceps de Reposicionamento Speosel Mod.

20-4504t	Gabarito
20-4506t	Gabarito
20-4507t	Gabarito
20-4516t	Gabarito
20-4540t	Gabarito
20-4544t	Gabarito
24-1050t	Gabarito
24-1052t	Gabarito
24-1054t	Gabarito
24-1056t	Gabarito
24-1058t	Gabarito
24-1060t	Gabarito
24-1064t	Gabarito
24-1066t	Gabarito
24-1068t	Gabarito
24-4506t	Gabarito
24-4512t	Gabarito
24-4518t	Gabarito
24-4524t	Gabarito
24-4540t	Gabarito
24-4542t	Gabarito
24-4544t	Gabarito
01-2721	Gabarito
01-2722	Gabarito
01-2724	Gabarito
01-2725	Gabarito
01-2726	Gabarito
01-2729	Gabarito
01-2731	Gabarito
01-2734	Gabarito
01-2735	Gabarito
01-2736	Gabarito
01-2737	Gabarito
01-2738	Gabarito
01-2739	Gabarito

**Observação:** Os instrumentais citados acima não fazem parte deste registro, portanto, são registrados e comercializados à parte.

**COMPATIBILIDADE DE COMPOSIÇÃO**

A matéria-prima utilizada nas Placas, objetos do registro é a mesma utilizada nos componentes ancilares. Portanto, de acordo com a norma ISO 21534/2005 não há restrições para esta combinação.

### **FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO MÉDICO**

As Placas Especiais para Mini e Micro Fragmentos TraumaOne® são disponibilizadas individualmente. As placas são disponibilizadas em sacos de Polietileno selado termicamente, onde também são disponibilizadas as Instruções de Uso. Os sacos plásticos de Polietileno, então são rotulados em um dos lados da embalagem com rótulo grande do fabricante.

**Observação:** O rótulo aprovado pela ANVISA será afixado externamente a embalagem final das peças, que será disponibilizada com as Instruções de Uso também aprovadas pela ANVISA.

### **INDICAÇÃO, FINALIDADE OU USO A QUE SE DESTINA O PRODUTO MÉDICO,**

As Família de Placas Especiais para Mini e Micro Fragmentos TraumaOne® são utilizadas para fixação e imobilização durante procedimentos, como por exemplo, fraturas, osteotomias, procedimentos reconstrutivos ou procedimentos de revisão para casos em que outros tratamentos ou dispositivos não tenham sido eficientes.

### **CONTRAINDICAÇÕES**

- Infecção Ativa;
- Sensibilidade a corpos estranhos. Onde a sensibilidade do material é suspeita, deve-se efetuar um teste antes da implantação;
- Pacientes com suprimento de sangue limitado, quantidade ou qualidade óssea insuficiente, infecção latente;
- Pacientes com condições neurológicas ou mentais que não se dispuserem ou forem incapazes de seguir as instruções pós-operatórias.

### **ADVERTÊNCIAS**

- Os dispositivos de fixação interna ajudam o cirurgião a alinhar e estabilizar o osso da face para a fixação de fraturas, osteotomias e procedimentos reconstrutivos. Ainda que esses dispositivos geralmente consigam atingir tais objetivos, não se pode esperar que substituam a ossatura normal ou que resistam a carga integral imposta sobre o dispositivo sem apoio.
- Os dispositivos de fixação interna são suportes internos ou dispositivos de partilha de carga que alinham a fratura até a cicatrização normal. Se houver consolidação tardia, não consolidação ou cicatrização incompleta do osso, o implante pode curvar-se, quebrar-se ou não funcionar. Consequentemente, é importante manter o local da fratura imobilizado até que ocorra uma consolidação óssea firme (confirmada através de exames clínicos e radiográficos). O tamanho e a forma dos ossos e do tecido mole limitam o tamanho e a resistência dos implantes. Os



implantes cirúrgicos estão sujeitos a tensões repetidas de uso que podem resultar em fratura por fadiga. Fatores como o nível de atividade do paciente e o cumprimento das instruções sobre suporte de carga afetam a vida útil do implante. O cirurgião deve dominar não apenas os aspectos médicos e cirúrgicos do implante, mas também seus aspectos mecânicos e metalúrgicos.

- Os materiais de implante estão sujeitos a corrosão. A implantação de metais e de ligas submete esses materiais a uma mudança constante de ambiente em termos de sais, ácidos e álcalis, que podem provocar corrosão. O contato entre metais e ligas diferentes pode acelerar o processo de corrosão, o que pode favorecer a fratura dos implantes;
- O manuseio correto dos implantes é de extrema importância. Os implantes devem ser modificados somente quando necessário. As modificações ou as moldagens excessivas dos implantes podem enfraquece-lo e contribuir para sua quebra. Marcas ou arranhões provocados no implante durante a cirurgia podem contribuir para sua quebra;
- Os implantes podem ser retirados após a cicatrização da fratura. Os implantes podem afrouxar-se, fraturar-se, sofrer corrosão, migrar ou provocar dor. Se um implante permanecer implantado após a cicatrização completa, ele poderá reduzir a força normal do osso, o que por sua vez pode aumentar o risco de refratura em um paciente ativo. O cirurgião deve avaliar os riscos e os benefícios da remoção do implante. A remoção do implante deve ser acompanhada de um manejo pós-operatório adequado para evitar a refratura;
- De instruções adequadas ao paciente. Os cuidados pós-operatórios são importantes. A capacidade e disposição do paciente para seguir as instruções é um dos aspectos mais importantes para o êxito no manejo da fratura. Pacientes com senilidade, doença mental, alcoolismo ou usuários de drogas podem apresentar um risco mais alto de problemas do dispositivo, pois estes pacientes podem ignorar as instruções e as restrições impostas as atividades. O paciente deve receber instruções quanto ao uso de suportes e aparelhos externos para imobilizar o local da fratura e limitar o suporte de carga. O paciente deve ser informado e alertado sobre o fato de o dispositivo não substituir o osso saudável normal e de poder quebrar-se, dobrar-se ou ser danificado em consequência de esforço, atividade, suporte de carga. O paciente deve ser informado e alertado sobre os riscos cirúrgicos gerais, complicações e possíveis efeitos adversos, e seguir as instruções do médico responsável pelo tratamento. O paciente deve ser informado sobre a necessidade de fazer exames regulares de acompanhamento pós-operatório enquanto o aparelho estiver implantado.
- Placas e parafusos de 1,0 mm e 1,5 mm, a exceção da distração osteogênica, não devem ser usados como único meio de fixação em aplicações de sustentação de peso na mandíbula.

## PRECAUÇÕES

- Não reutilize os implantes. Mesmo que um implante pareça não estar danificado, o esforço a que foi submetido previamente pode ter criado imperfeições que irão reduzir sua vida útil. Não

trate os pacientes com implantes que tenham sido colocados, mesmo que momentaneamente, em um outro paciente.

- Existem instrumentos para auxiliar a implantação correta dos dispositivos de fixação interna para cada tipo de sistema. Já foram registrados casos de fratura ou quebra de instrumentos durante o curso da cirurgia. Instrumentos cirúrgicos estão sujeitos a desgaste em condições normais de utilização. Instrumentos que tenham sido expostos a uso extensivo ou que tenham sido submetidos a força excessiva estão sujeitos a fratura. A Biomet Microfixation recomenda que todos os instrumentos sejam inspecionados regularmente, para detecção de desgaste e de alteração das características originais.
- Os instrumentos cirúrgicos devem ser usados apenas com os sistemas de dispositivos para os quais foram criados. O uso de instrumentos de outros fabricantes pode acarretar riscos incalculáveis para o implante e para o instrumento, podendo colocar em perigo o paciente, o usuário ou outras pessoas.

#### **EFEITOS ADVERSOS**

- Formação óssea insuficiente, osteoporose, osteólise, osteomielite, revascularização inibida ou infecção podem causar afrouxamentos, curvaturas, rachaduras ou fraturas no dispositivo;
- Não consolidação ou consolidação tardia, podendo levar a quebra do implante;
- Migração, curvatura, fratura ou afrouxamento do implante;
- Sensibilidade a metais ou reação alérgica a um corpo estranho;
- Diminuição da densidade óssea devido a redução da força normal do osso;
- Dor, desconforto, sensação anormal ou palpabilidade decorrentes da presença do dispositivo;
- Aumento da reação de tecido fibroso ao redor do local da fratura e/ou do implante;
- Necrose óssea;
- Cicatrização incompleta.

Além desses efeitos adversos, existe a possibilidade de haver complicações decorrentes de qualquer procedimento cirúrgico, tais como infecções, lesões nervosas e dores, entre outras, que possam não estar relacionadas ao implante.

#### **CUIDADOS ESPECIAIS**

- Deve-se usar sempre a chave de parafusos que foi projetada para um sistema específico de parafusos a fim de garantir que a conexão cabeça do parafuso/chave seja apropriada.
- O alinhamento ou ajuste incorreto da chave de parafusos com a cabeça do parafuso pode aumentar o risco de dano ao implante ou à chave de parafusos.
- Torque excessivo pode causar a fratura do parafuso.

## ESTERILIZAÇÃO

Os dispositivos metálicos de fixação interna são fornecidos **NÃO ESTÉREIS** e devem ser esterilizados antes da utilização cirúrgica. Os implantes não utilizados podem ser reesterilizados. Os implantes que tocaram na área defeituosa entraram no sítio cirúrgico ou entraram em contato com o sangue ou outros fluidos do paciente não podem ser esterilizados novamente. A seguir apresenta-se um ciclo mínimo recomendado para a esterilização a vapor, o qual foi validado pela Biomet Microfixation em condições laboratoriais.

Esterilização a vapor pré-vácuo (Hi-VAC) com invólucro:	
Temperatura:	132°C
Tempo:	4 (quatro) minutos
Tempo de secagem:	MÍNIMO de trinta (30) minutos

**Obs.:** Embora o fabricante recomende o método de esterilização descrito acima, o método deve ser avaliado e definido pelo hospital, com auxílio da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, levando-se em consideração a biocarga do local.

## TÉCNICA CIRÚRGICA


**Observação:** A descrição da técnica cirúrgica é apenas para orientação, ela não visa substituir o conhecimento nem ensinar o cirurgião a efetuar a implantação do produto. O produto deve ser implantado por médico capacitado e treinado para este fim.

**Passo 1:** Escolha a placa adequada (com ajuda dos gabaritos, se houver) a ser utilizada para fixação do osso desejado. Instrumentos de modelagem (dobrador) poderão ser utilizados para adequarem o formato das placas à anatomia do osso. As placas poderão ser cortadas no tamanho adequado quando convier.



**Observação:** Verifique quais parafusos podem ser utilizados com a placa escolhida de acordo com a tabela apresentada e as orientações do item “Correlação Parafusos/Placa”.

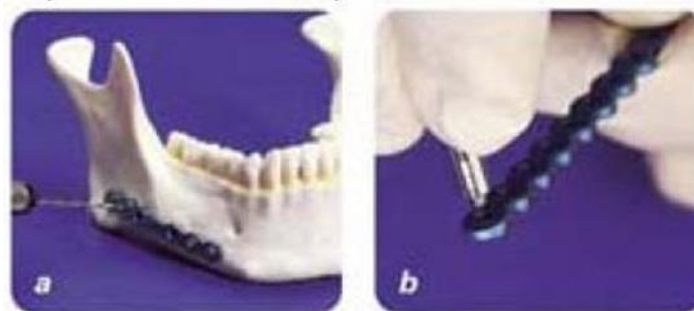**Passo 2:** Perfure o orifício piloto para inserção do parafuso. O orifício piloto poderá ser perfurado sem o uso de um guia de broca, o orifício não necessita ser perfeitamente perpendicular à placa. Entretanto, um guia de broca poderá ser utilizado opcionalmente. Não há necessidade de formar orifícios piloto para inserção de parafusos auto perfurantes.



**Passo 3:** Insira o parafuso de dimensões adequadas.



**Observação:** Os parafusos e instrumentais citados nesta técnica cirúrgica não fazem parte da Família de Placas Especiais de Mini e Micro Fragmentos objeto deste registro, portanto, são comercializados à parte.

#### **ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE**

As peças devem ser acondicionadas em local fresco e seco e mantidas fora da luz solar direta. Conservar o produto conforme especificações abaixo:

<b>Temperatura:</b> 10°C a 40°C
<b>Umidade relativa:</b> 40 a 80%

#### **IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE**

As Placas Especiais para Mini e Micro Fragmentos TraumaOne® não possuem marcação em seus próprios corpos, pois o espaço é insuficiente. Entretanto, todas as peças possuem em suas embalagens um rótulo do fabricante, fixado externamente à embalagem, e um rótulo do importador (aprovado pela ANVISA) que possuem as informações necessárias para identificação e rastreabilidade das peças, tais como: número do lote, código da peça, identificação/descrição da peça, nome do fabricante (nos rótulos aprovados pela ANVISA também constam, por exemplo, número de registro da ANVISA e identificação do importador).

Na solicitação de material para cirurgia os dados cirúrgicos, tais como nome do médico, nome do paciente, hospital e data do procedimento, devem ser fornecidos ao distribuidor do produto. Estes dados serão armazenados pelo distribuidor e disponibilizados posteriormente ao fabricante.

O distribuidor dos produtos no Brasil disponibilizará, juntamente com as instruções de uso aprovadas pela ANVISA, 4 (quatro) rótulos autoadesivos avulsos, com as mesmas informações do rótulo aprovado pela ANVISA, destinados à rastreabilidade do produto.

As seguintes informações necessárias à rastreabilidade do produto constarão nos rótulos autoadesivos: identificação do fabricante, código e descrição da peça, número de lote da peça, número de registro da ANVISA, identificação do importador (detentor do registro no Brasil), composição, dentre outras.

Os rótulos autoadesivos devem ser devidamente distribuídos de forma a garantir a rastreabilidade do produto, sendo uma para o paciente, ou responsável, uma deve ser afixada no prontuário do paciente ou relatório de operação, uma deve permanecer no almoxarifado do hospital, e outra enviada ao distribuidor do produto.

Caso seja observado algum Evento Adverso ou haja necessidade de realização de Queixa Técnica deve-se proceder à notificação no Sistema Nacional de Notificações para a Vigilância Sanitária – NOTIVISA,

que pode ser encontrado no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA no endereço [www.anvisa.gov.br](http://www.anvisa.gov.br), link [NOTIVISA](#).

#### **DESCARTE DO PRODUTO**

Produtos explanados e impróprios para uso devem ser descaracterizados e inutilizados antes do descarte, evitando-se o uso inadequado.

O descarte do produto deve ser realizado de acordo com as normas de Controle de Infecção Hospitalar de cada hospital, obedecendo as diretrizes ambientais Estabelecidas pela Resolução RDC 222/18 da Anvisa.

*Eduardo Thomé Braga*  
**Responsável legal**

*Alina Ávila Soares de Oliveira*  
**Responsável Técnico**